




➤ Réinsertions / Réparations ligamentaires ou tendineuses pour les petites articulations

➤ Ligament or tendon repairs and reinsertions of small joints

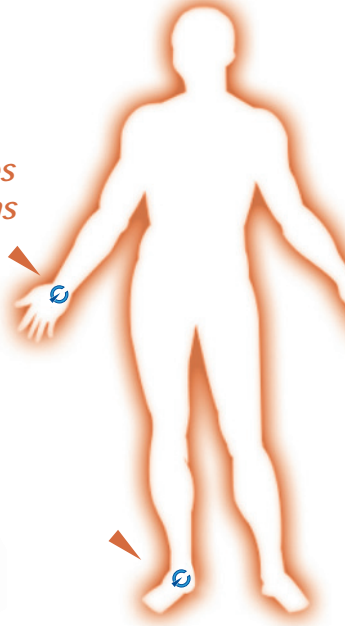

### Profil



#### Features

- Ancre auto-taraudeuse munie d'un fil de suture non résorbable aiguillé.  
Self-tapping anchor with non-absorbable suture with needles.
- Ancre montée sur un dispositif d'insertion dont l'extrémité 4 pans creux permet un maintien efficace.  
Anchor assembled with an insertion device. This device has a 4 sides print to ensure the good holding of the anchor.




### Avantages



#### Benefits

- Rainure de passage de fil assurant sa protection complète lors du vissage de l'ancre, jusqu'au premier épaulement du dispositif d'insertion.  
The groove passage of the suture ensures its complete protection at the time of screwing, to the first shoulder of the insertion device.
- Bouchon de protection des aiguilles à l'extrémité du manche.  
Protective cap of the needles at the end of the handle.

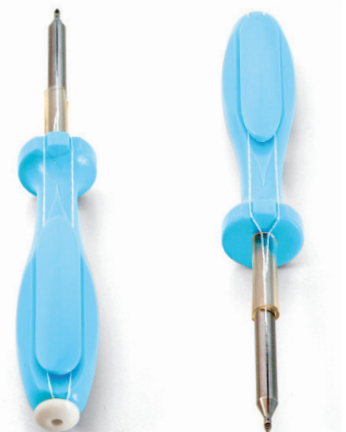



## Fabrication

i

### Manufacturing

#### Stérilisation

##### Sterilization

- Rayonnements Gamma, dose 25 kGy.
- Gamma irradiation at 25 kGy.

#### Matière

##### Material

- Ancre en alliage de titane TA6V ELI (ISO 5832-3).
- Titanium alloy anchor TA6V ELI (ISO 5832-3).
- Fil de suture en polyester siliconé ou en UHMWPE.
- Silicone polyester or UHMW polyethylene suture.
- Deux aiguilles en acier inoxydable.
- Two stainless steel needles.







Fabriqué en France par ORTHOMED  
Manufactured in France by ORTHOMED



## Caractéristiques

) (

### Characteristics

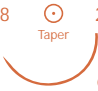Référence Product number	Ancre Anchor	Suture			Aiguilles Needles
		Matériau Material	Diam./Long. Diam./Length	Résistance Strength	
AVS3-200	Ø 2 mm	PET	2 Metric (# 3-0) / 50 cm	16 N	4/8  18 mm 51/100
AVS3-300	Ø 3 mm	PET	3.5 Metric (# 0) / 50 cm	40 N	4/8  18 mm 81/100
120200	Ø 2 mm	UHMWPE	3 Metric (# 2-0) / 50 cm	58 N	3/8  20 mm 66/100
120300	Ø 3 mm	UHMWPE	3 Metric (# 2-0) / 50 cm	58 N	3/8  20 mm 66/100

Distribué par

Distributed by

**ORTHOMED**

ORTHOMED SA - ZAC de St. ESTEVE  
06640 St JEANNET Côte d'Azur, FRANCE  
Tél : +33(0)4 92 12 33 77  
Fax : +33(0)4 92 12 33 88  
contact@orthomed.fr - www.orthomed.fr

