



FICHE TECHNIQUE


Ancrage vissé de suture

Métallique



Ancrage vissé de suture

Métallique

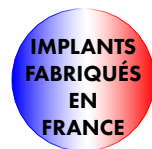

Les **ANCRAGES VISSÉS DE SUTURE MÉTALLIQUES** références 120200 et 120300 sont indiqués pour chirurgie de la main et du pied, pour les réinsertions ou réparations ligamentaires ou tendineuses. Les autres références (120400, 120500, 120505-A et 120505-B) sont indiquées pour la réparation de la coiffe des rotateurs sous arthroscopie ou en chirurgie à ciel ouvert.

L'ancre est montée sur un dispositif d'insertion dont l'extrémité en plusieurs pans permet un maintien efficace.

Les gorges de passage de fils au niveau de la tête de l'ancre assurent leur protection pendant le vissage.

Les fils de suture se libèrent facilement par l'ouverture du capuchon de protection du manche.

Il existe des instruments dédiés à la pose de ces dispositifs.

- + Dispositif Médical Implantable en contact permanent avec l'os et les tissus mous (>30 jours) de classe IIb.
- + Ancre en alliage de titane (TA6V), fils de suture en polyéthylène à très haut poids moléculaire (UHMWPE) non résorbable pouvant être sertis avec une ou deux aiguilles en acier inoxydable.
- + Stérilisation par rayonnements gamma.
- + Différents diamètres d'ancres, fils aiguillés ou non selon l'indication.
- + Conditionnement à l'unité, conservation recommandée dans un endroit sec à l'abri de la lumière. Durée de validité de 60 mois.
- + Les informations présentées dans cette brochure ont pour but de donner des informations sur le produit. Veuillez vous référer au packaging, aux étiquettes et/ou à la notice avant d'utiliser ce produit. Document réservé à l'usage des professionnels de santé.
- + Ce produit n'est pas disponible à la vente dans tous les pays.

CE 0459 - LNE GMED



120200 & 120300
Chirurgie de la main et du pied



**120400, 120500,
120505A & 120505B**
Chirurgie de l'épaule et du genou







5812-A
Pointeau pour ancre Ø3 mm



5813-A
Pointeau pour ancre Ø4 mm

Références produit

120200	AVS Ø 2mm - 1 suture 3 metric (USP#2-0) longueur 50cm - 2 aiguilles rondes
120300	AVS Ø 3mm - 1 suture 3 metric (USP#2-0) longueur 50cm - 2 aiguilles rondes
120400	AVS Ø 4mm - 1 suture 5 metric (USP#2) longueur 50cm - 1 aiguille ronde + 1 aiguille triangulaire
120500	AVS Ø 5mm - 1 suture 5 metric (USP#2) longueur 50cm - 1 aiguille ronde + 1 aiguille triangulaire
120505B	AVS Ø 5.5mm - 2 sutures 5 metric (USP#2) longueur 50cm - 2 aiguilles rondes + 2 aiguilles triangulaires
120505A	AVS Ø 5.5mm - 2 sutures 5 metric (USP#2) longueur 93cm - non aiguillé

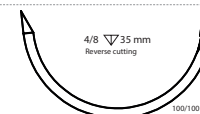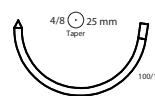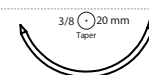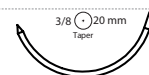

5812-A	Pointeau pour AVS Ø 3mm
5813-A	Pointeau pour AVS Ø 4mm