



FICHE TECHNIQUE


Vis d'interférence

Métallique



Vis d'interférence

Métallique

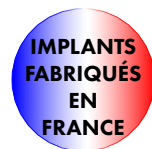

Les **vis d'interférence métalliques** sont indiquées pour la chirurgie des ligaments croisés du genou, fixation tibiale et fémorale dans les tunnels osseux :

- des transplants os - tendon - os pour les vis d'interférence os/os,
- de tous les types de transplants et des ligaments prothétiques LIGASTIC® pour les vis d'interférence à filet atraumatique.

Leur tête dispose de bords arrondis et la partie distale est conique, en forme d'ogive.

La vis est canulée pour permettre le montage sur une broche. L'empreinte interne est standard : hexagonale.

Leur matière les rend compatibles à l'IRM.

Un tournevis unique pour toutes les tailles de vis facilite leur implantation.

- + Dispositif Médical Implantable en contact permanent avec l'os et les tissus mous (>30 jours) de classe IIb.
- + Fabriquées en alliage de titane (TA6V).
- + Stérilisation par rayonnements gamma - disponible non stérile.
- + Diamètres 7, 8 ou 9mm, longueurs 18, 23 ou 28mm
- + Conditionnement à l'unité, conservation recommandée dans un endroit sec à l'abri de la lumière. Durée de validité de 60 mois pour les références stériles.
- + Les informations présentées dans cette brochure ont pour but de donner des informations sur le produit. Veuillez vous référer au packaging, aux étiquettes et/ou à la notice avant d'utiliser ce produit. Document réservé à l'usage des professionnels de santé.
- + Ce produit n'est pas disponible à la vente dans tous les pays.

CE 0459 - LNE GMED

Vis os-os

Vis atraumatique



7 x 18 mm



7 x 18 mm



8 x 23 mm



8 x 23 mm



9 x 28 mm



9 x 28 mm



0010-C
Tournevis pour vis métallique

Références produit

Non stérile	Stérile	Description
Vis os-os		
7.18HEX	7.18HEX(S)	Vis d'interférence Ø 7 x 18mm
8.18HEX	8.18HEX(S)	Vis d'interférence Ø 8 x 18mm
9.18HEX	9.18HEX(S)	Vis d'interférence Ø 9 x 18mm
7.23HEX	7.23HEX(S)	Vis d'interférence Ø 7 x 23mm
8.23HEX	8.23HEX(S)	Vis d'interférence Ø 8 x 23mm
9.23HEX	9.23HEX(S)	Vis d'interférence Ø 9 x 23mm
7.28HEX	7.28HEX(S)	Vis d'interférence Ø 7 x 28mm
8.28HEX	8.28HEX(S)	Vis d'interférence Ø 8 x 28mm
9.28HEX	9.28HEX(S)	Vis d'interférence Ø 9 x 28mm

Vis atraumatiques

0990718	1000718	Vis d'interférence Ø 7 x 18mm
0990818	1000818	Vis d'interférence Ø 8 x 18mm
0990918	1000918	Vis d'interférence Ø 9 x 18mm
0990723	1000723	Vis d'interférence Ø 7 x 23mm
0990823	1000823	Vis d'interférence Ø 8 x 23mm
0990923	1000923	Vis d'interférence Ø 9 x 23mm
0990728	1000728	Vis d'interférence Ø 7 x 28mm
0990828	1000828	Vis d'interférence Ø 8 x 28mm
0990928	1000928	Vis d'interférence Ø 9 x 28mm

Ancillaire associé

0010-C	Tournevis pour vis métallique
--------	-------------------------------