



FICHE TECHNIQUE

ANCHORMAN™

Fixation corticale tibiale



ANCHORMAN™

Fixation corticale tibiale

L'**ANCHORMAN** est un dispositif de fixation destiné à être utilisé pour la chirurgie de reconstruction du Ligament Croisé Antérieur (LCA).

L'**ANCHORMAN** est simple à utiliser. Sa taille unique s'adapte à tous les tunnels tibiaux dont le diamètre se situe entre 7 et 10mm. Sa pose n'exige que l'utilisation du gabarit dédié.


L'**ANCHORMAN** permet la préservation des fibres tibiales natives, améliorant aussi l'ouverture pour la fixation. Avec sa boucle en PEEK, l'**ANCHORMAN** permet une fixation moins traumatique car il n'y a pas de filetage ou de mouvement de suture qui pourrait abîmer le greffon.

- + Dispositif Médical Implantable en contact permanent avec l'os et les tissus mous (>30 jours) de classe IIb.
- + Fabriqué en PEEK.
- + Stérilisation par rayonnements gamma.
- + Taille unique.
- + Conditionnement à l'unité, conservation recommandée dans un endroit sec à l'abri de la lumière. Durée de validité de 60 mois.
- + Les informations présentées dans cette brochure ont pour but de donner des informations sur le produit. Veuillez vous référer au packaging, aux étiquettes et/ou à la notice avant d'utiliser ce produit. Document réservé à l'usage des professionnels de santé.
- + Ce produit n'est pas disponible à la vente dans tous les pays.

CE 0088 - LRQA - Marquage détenu par la société Summit Medical LTD

Références produit

D201019	Implant tibial en PEEK ANCHORMAN
0320-A	Gabarit tibial ANCHORMAN

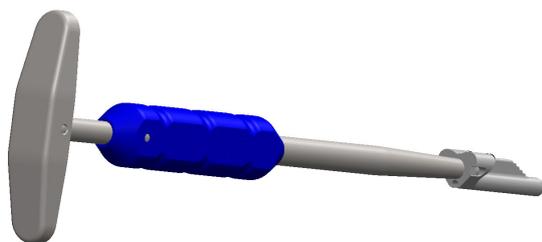

D201039
Gabarit de préparation

OrthoD

FABRIQUÉ PAR
SUMMIT MEDICAL LTD
Part of the OrthoD Group
Industrial Park
Bourton-on-the-Water
Gloucestershire
GL54 2HQ
United Kingdom
tel. +44 (0) 1451 821311
email info@orthod.com
site web www.orthod.com