



FICHE TECHNIQUE

LACE UP™

Suture à boucle continue



LACE UP™

Suture à boucle continue

Le **LACE UP** permet une compression unilatérale lors de la préparation du greffon, tout en améliorant la résistance et en réduisant le temps de préparation du greffon de façon considérable.

Le LACE UP est disponible en 4 variations :

- aiguille droite avec fils blanc/ bleu ou blanc/ noir pour la préparation traditionnelle du greffon

- aiguille courbe avec fils blanc/ bleu ou blanc/ noir pour la préparation du greffon lorsque ce dernier est encore attaché.

Le système de noeud autobloquant permet différents types de configuration de suture et agit comme une structure permettant un meilleur verrouillage du noeud et une meilleure manipulation.

Excellente résistance : plus résistant que le métal à poids équivalent.

Plus résistant à l'abrasion que le polyester.

Configuration en E-braid pour une meilleure prise en main et une excellente résistance du noeud.

Couleurs vives de suture avec des motifs tri-axiaux pour une meilleure visibilité.




- + Dispositif Médical Implantable en contact permanent avec l'os et les tissus mous (>30 jours) de classe III.
- + Fils en fibres de polyéthylène à haut poids moléculaire (UHMWPE), sertis d'aiguilles en acier inoxydable.
- + Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- + Disponible avec aiguilles droites ou courbes.
- + Conditionnement à l'unité, conservation recommandée dans un endroit sec à l'abri de la lumière. Durée de validité de 60 mois.
- + Les informations présentées dans cette brochure ont pour but de donner des informations sur le produit. Veuillez vous référer au packaging, aux étiquettes et/ou à la notice avant d'utiliser ce produit. Document réservé à l'usage des professionnels de santé.
- + Ce produit n'est pas disponible à la vente dans tous les pays.

CE 0459 - Marquage détenu par la société Riverpoint

Références produit

D201029	Blanc/Bleu #2(5-0) métrique aiguille droite
D201030	Blanc/Noir #2(5-0) métrique aiguille droite
D201035	Blanc/Bleu #2(5-0) métrique aiguille courbe
D201036	Blanc/Noir #2(5-0) métrique aiguille courbe

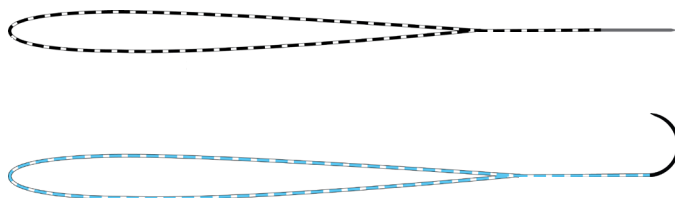

OrthoD

DISTRIBUÉ PAR
SUMMIT MEDICAL LTD
Part of the OrthoD Group
Industrial Park
Bourton-on-the-Water
Gloucestershire
GL54 2HQ
United Kingdom
tel. +44 (0) 1451 821311
email info@orthod.com
site web www.orthod.com